

# RhinoClear Sprint

Mobiler Nasenvernebler – befreit Nase und Nebenhöhlen



## Die erste batteriebetriebene, tragbare Nasendusche mit integriertem Kompressor.

Feine, auf die oberen Atemwege abgestimmte Aerosole werden in jeweils ein Nasenloch vernebelt. Dadurch werden festsitzender Schleim und Schadstoffe, wie allergieauslösende Pollen, von den Nasenschleimhäuten gespült. Die verschmutzte Flüssigkeit fließt automatisch in eine separate Kammer.

- *Angenehme, sanfte Verneblung*
- *Zur Therapie der oberen Atemwege*
- *Geeignet für Salzlösungen und Medikamente*
- *Keine Schüssel oder Waschbecken nötig*
- *Für Kinder und Erwachsene*

**Lieferumfang:** RhinoClear Sprint mit integriertem Kompressor, 3 Nasenansatzstücke für Kinder und Erwachsene, 2 Batterien AA, Gebrauchsanweisung

## Aerosolcharakteristika

MMAD*	> 10 µm
Verneblungsleistung	ca. 2 min/10 ml

## Technische Daten

Gewicht (inkl. Kompressor)	185 g
Gehäuseabmessung	7,2 x 5,3 x 15,8 cm
Stromversorgung	2 AA Batterien (inkl.)
Füllvolumen Vernebler	15 ml

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
RhinoClear Sprint	03386767	M54100-10

\* Messmethode gemäß Vorgaben der pharmakologischen Fakultät der Universität von Parma (Malvern Mastersizer)

# Optionales Zubehör




## RhinoClear Sprint Vernebler-Set

Für Erwachsene und Kinder

Jeder Familienangehörige sollte aus hygienischen Gründen ein eigenes Vernebler-Set verwenden!

Verneblerkammer, 3 Nasenansatzstücke, 4-farbige Sticker

BEZEICHNUNG	PZN	ARTIKEL-NR.
RhinoClear Sprint Vernebler-Set	3386856	M54100-11

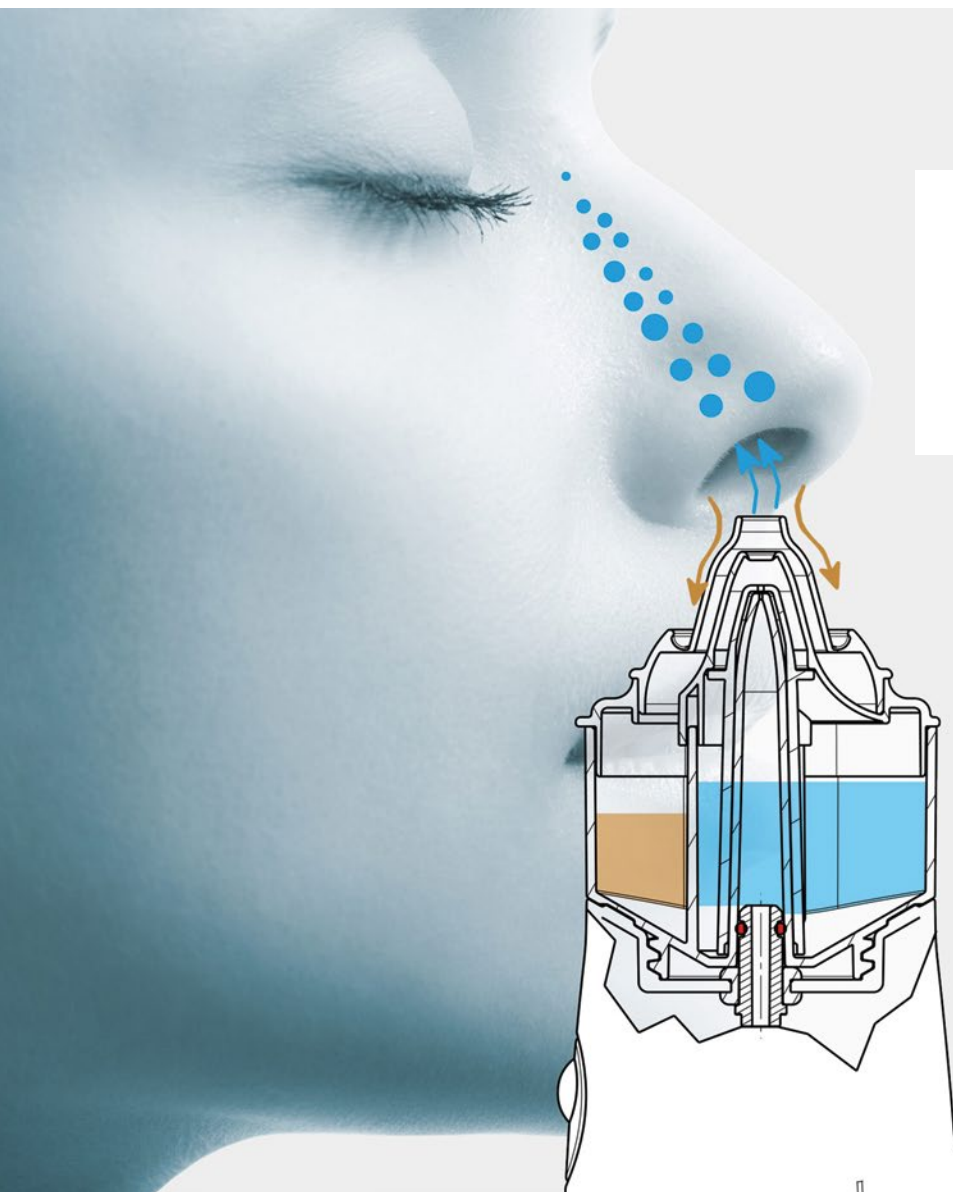

**Das zwei Kammern-Prinzip befreit Nase und Nebenhöhlen auf Knopfdruck**

Blau = Inhalationslösung

Braun = verschmutzte Flüssigkeit