



SonoDrop *Profi*

Der Spezialist für die sichere Langzeitvernebelung



Unser Spezialist

SonoDropProfi



Feinste Aerosolteilchen
0,5 – 5 μm



Touch-LCD Display
mit Hintergrundbeleuchtung



Warmes Aerosol
Heizstufe wählbar



Timerfunktion
0 – 99 min.



Mobil
Fahrgestell optional

Schläuche und weitere Zubehörteile finden Sie unter www.mpvmedical.com



MMAD
0,5 – 5 µm



2
Jahre
Garantie

SonoDrop Profi

Der Spezialist für die sichere Langzeitvernebelung

Der **SonoDrop Profi** wurde speziell für die Bedürfnisse der Langzeitbefeuchtung entwickelt. Er produziert warmes oder kaltes, feines Aerosol (0,5 – 5 µm MMAD), das ideal die unteren Bereiche der Lunge therapiert. Das Aerosol wird in einer sterilen, geschlossenen Nebelkammer erzeugt.

Das **RespiFlo UN Nachlaufsystem** garantiert einen hygienisch sicheren Einsatz von bis zu 8 Stunden.

SonoDrop Profi ist ein Ultraschallvernebler, der perfekt für den Einsatz in Kliniken, Pflegeheimen und im Home Care Bereich geeignet ist. Das große Einfüllvolumen (5 – 150 ml) und die Timerfunktion machen ihn zu einem verlässlichen Partner in der Pflege.

INDIKATIONSBEISPIELE:

Tracheotomie · Atelektasen · Asthma bronchiale · Pharyngitis · Schleimhauterkrankungen · Pneumonie / -prophylaxe · Bronchitis · Laryngitis · Bronchiektasen · auf der Palliativstation

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2 kg
Gehäuseabmessung (L x B x H)	250 x 200 x 250 mm
Betriebsspannung	100 – 240V AC, 50–60Hz
Floweinstellung	bis 20 l/min, einstellbar
Geräuschpegel	< 35dBA


AEROSOLCHARAKTERISTIKA

MMAD*	0,5 – 5 µm
Massenanteil < 5 µm*	48%
Verneblungsleistung	0 – 5 ml/min

Touch-LCD Display

mit Hintergrundbeleuchtung

Durch das übersichtliche Display haben Sie die Kontrolle über sämtliche Parameter. Diese werden durch verschiedene Symbole angezeigt und lassen sich intuitiv und einfach einstellen:

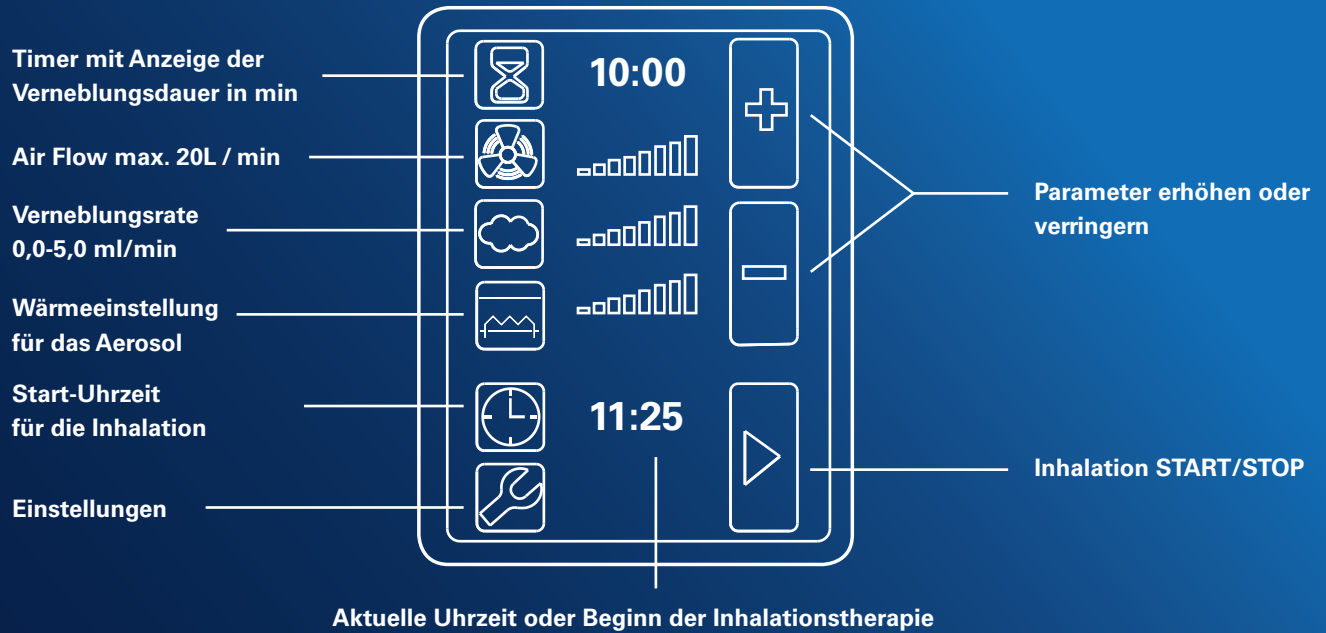

Bestellinformationen

SonoDrop Profi

BEZEICHNUNG	ARTIKEL-NR.
SonoDrop Profi kalt Professioneller Ultraschallvernebler mit LCD-Touchscreen	M55200-02
Lieferumfang: Ultraleicht-Silikonschlauch 40 cm, Ultraleicht-Silikonschlauch 100 cm, Gelenkarm, Bakterienfilter, Flaschenhalter	
SonoDrop Profi warm Professioneller Ultraschallvernebler mit LCD-Touchscreen mit Heizschlauch	M55200-03
Lieferumfang: Ultraleicht-Silikonschlauch 40 cm, Ultraleicht-Heizschlauch 100 cm, Gelenkarm, Bakterienfilter, Flaschenhalter	
Fahrgestell SonoDrop Profi	M55200-00700
Fünffußstativ mit Edelstahlhaltestange und Halteplatte (ohne Gelenkarm)	

Hygiene in der Pflege

SonoDrop Profi erfüllt selbst höchste Anforderungen

Herkömmliche Ultraschallvernebler sind häufig verkeimt und bergen ein hohes Infektionsrisiko für die Patienten in sich. Der **SonoDrop Profi** ist anders! Der innovative Ultraschallvernebler bietet den Patienten einen maximalen Schutz vor Infektionen:



Artikel-Nr. M31400-05



Artikel-Nr. M50050-02900

Artikel-Nr. M50050-42900

RespiFlo UN Sterilwassersystem


Das geschlossene **RespiFlo UN** Sterilwassersystem senkt die Gefahr von Wasserkeimen entscheidend. Das Aerosol für den Patienten wird in einer sterilen, geschlossenen Nebelkammer erzeugt, die automatisch über ein steriles Überleitsystem mit Sterilwasser befüllt wird.

100% Ultraleicht-Silikonschläuche

Bei dem Schlauchsystem haben Sie die Wahl zwischen Einmalschläuchen oder unseren 100% Ultraleicht-Silikonschläuchen – wahlweise mit integrierter Heizung. Die Silikonschläuche sind autoklavierbar.



Artikel-Nr. M55200-00900

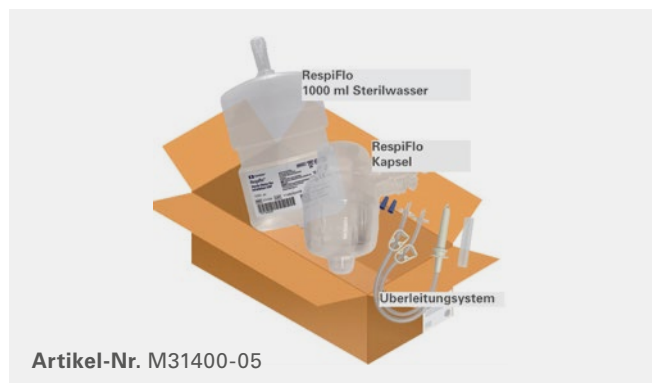

Artikel-Nr. M31400-05

Bakterien-/Virenfilter

Bevor die Luft in die sterile Nebelkammer und zum Patienten gelangt, passiert sie einen zusätzlichen, mitgelieferten Bakterien- und Virenfilter.

RespiFlo UN-Set, 6er-Pack Karton

6 x RespiFlo Universalflasche 1000 ml,
Steriles, pyrogenfreies Wasser

6 x RespiFlo Kapsel 145 ml

Verneblungskammer mit 145 ml Sterilwasser gefüllt
6 x RespiFlo UN Überleitsystem

Stempelfeld

Hersteller:

PRIZMA d.o.o.
Kumanovska 8
34000 Kragujevac, Serbia

Vertrieb:

MPVMEDICAL

Parsdorfer Weg 6
85551 Kirchheim b. München

Tel. +49 (0)89 7299 700-0
Fax +49 (0)89 7299 700-99

www.mpvmedical.com
info@mpvmedical.com

